


## EXTRÊMEMENT FACILE À L'EMPLOI ET PROTECTION DE LA PEAU 'HIGH PERFORMANCE'




Étiquette à code couleur  
Indique facilement si le coussin et la housse sont de la même taille

Sûr à utiliser dans toutes les directions :  
haut = bas ; gauche = droite ;  
avant = arrière.

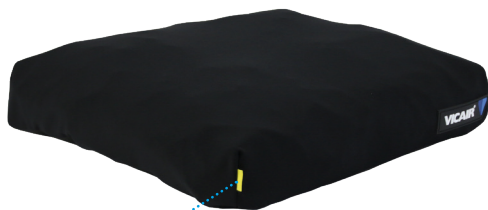

4 compartiments équivalents

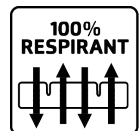

- ▲ Protection cutanée haute performance grâce à une redistribution uniforme de la pression
- ▲ Grande facilité d'utilisation
- ▲ Soutien du bassin et des cuisses pour une position assise stable

Le Vicair 4 se compose de 4 compartiments individuels identiques conçus pour épouser les contours sous charge. Le coussin est toujours placé correctement, car les quatre côtés peuvent être à l'avant ou à l'arrière, même le haut et le bas sont identiques. La configuration des quatre compartiments est conçue pour fonctionner ensemble afin de trouver un équilibre unique entre confort, préservation de la peau et soutien pelvien. Les quatre compartiments individuels identiques permettent un positionnement correct à toute épreuve sur la surface d'assise. Les coussins et housses Vicair 4 ont la caractéristique unique d'étiquettes à code couleur, indiquant facilement si le coussin et la housse sont de la même taille. Ceci est considéré comme bénéfique dans les environnements où de nombreux coussins de fauteuil roulant sont utilisés à la fois, tels que les centres de soins.

### PERFORMANCE PRODUIT

#### Priotection de la peau / Anti escarres

Redistribution de la pression	▲▲▲▲▲
Réduction de la force de cisaillement	▲▲▲△△
Contrôle de l'humidité	▲▲▲▲▲
Amortissement des chocs et des vibrations	▲▲▲▲▲

#### Positionnement

Stabilité latérale	▲▲▲▲△
Stabilité frontale	▲▲▲▲▲
Réduction des glissements	▲▲▲▲▲
Permet les ajustements manuels	N/A
Longévité améliorée	▲▲▲▲△

#### Entretien et sécurité

Durabilité	▲▲▲▲▲
Fiabilité	▲▲▲▲▲
Fonctionnalité en cas d'utilisation abusive	▲▲▲▲▲
Facile à entretenir	▲▲▲▲▲
Qualité hygiénique	▲▲▲▲▲

#### Fonctionnalité et application

Confort	▲▲▲▲▲
Poids ultra léger	▲▲▲▲▲
Permet des transferts faciles	▲▲▲△△
Disponibles en tailles standards	▲▲▲△△
Poids maximum autorisé	▲▲▲▲△

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	8 cm
Poids moyen	800 grammes
Poids maximum autorisé	250 kg
Lavable en machine	60°C max.

### TAILLES DES COUSSINS

- Disponible
- Pas disponible

Inch	Largeur				
	16	17	18	19	20
CM	40	43	45	48	50
16	■				
17		■			
18			■		
19				■	
20					■

### HOUSSES DISPONIBLES

Comfair Cover et Incotec Cover.