


HET MEEST STABIELE ROLSTOELKUSSEN

Lagedrukzone - Twee compartimenten
voor superieure ontlasting van
staartbeen en zitbotten & extra
positioneermogelijkheden

Ondersteuning Trochanters
voor laterale stabiliteit |
herverdeling van druk, om een
lagedrukzone te creëren

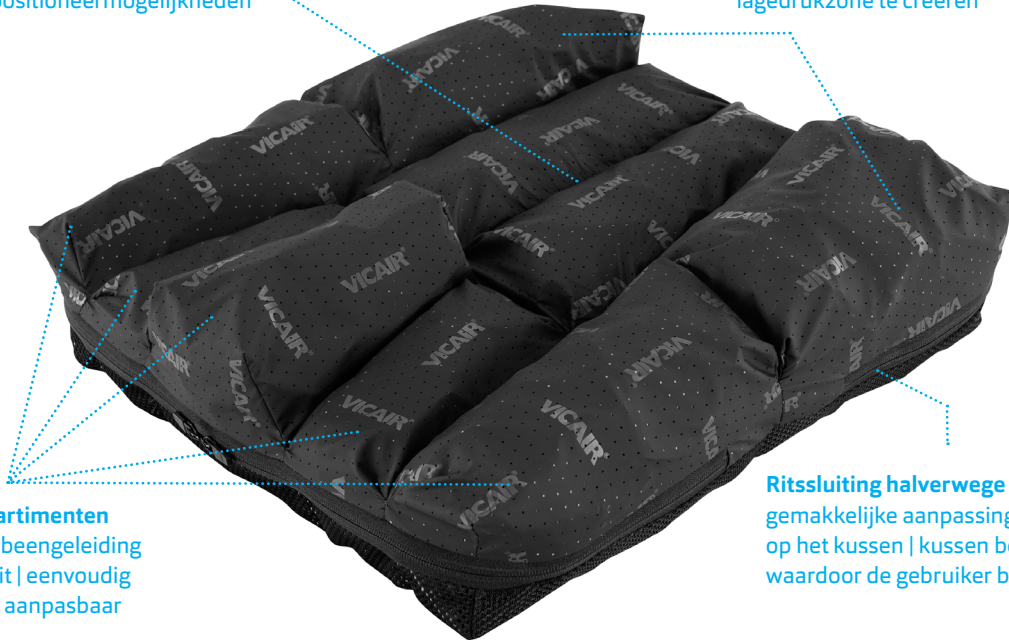

Voorcompartimenten
voor bovenbeengeleiding
en stabiliteit | eenvoudig
individueel aanpasbaar

Ritsluiting halverwege en rondom voor
gemakkelijke aanpassing met de gebruiker
op het kussen | kussen behoudt haar vorm,
waardoor de gebruiker beter beschermd is

VERBETERD ONTWERP



Meer reikwijdte voor de gebruiker

Negen aanpasbare compartimenten voor optimale stabiliteit

Extra bovenbeenpositionering

Soms is het nodig om het kwetsbare gebied rondom zitbotten en staartbeen te ontlasten. Dat is precies wat de Vicair Vector 02 doet. Verder zorgt de unieke compartimentindeling voor extra bekkenstabiliteit, excellente beengleiding, huidbescherming en comfort. 100% machinewasbaar en ademend, voor optimale hygiëne en perfecte temperatuur- en vochtregulatie. De Vector 02 biedt ondersteuning waar nodig, zodat het bovenlichaam functioneler is en de armen verder reiken.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	▲▲▲▲▲
Herverdeling druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Transfer-gemak	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Hoeveelheid onderhoud	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Laag kussengewicht	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲
Lage zithoogte	▲▲▲▲▲
Automatische aanpassing	▲▲▲▲△

TE GEBRUIKEN BIJ

Ruggenmergletsel, neuromusculaire aandoeningen, hypermobiliteitsyndroom, Ehlers Danlos Syndroom (EDS)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	6 en 10 cm
Gemiddeld gewicht	725 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSENMATEN

■ Standaard	(Maat >53 cm altijd hoogte 10)
■ Op aanvraag	

Inch	breedte										
	14	15	16	17¼	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35										
15	38										
16	40										
17¼	43										
18	45										
19	48										
20	50										
21	53										
22	55										
23	58										
24	60										