


HET OPTIMALE KUSSEN VOOR PEDIATRIE

Trochanter en dijbeenondersteuning voor positioneren | laterale stabiliteit

Lagedrukzone voor het ontlasten van staartbeen en zitbeenknobbels



Beengeleiding

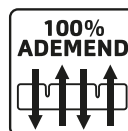

- ▲ Speciaal ontworpen voor kinderen
- ▲ Gevuld met kleine SmartCells voor optimale drukverdeling
- ▲ Gemaakt voor zorgeloze mobiliteit

De Vicair Junior Vector 02 is een anatomisch voorgevormd kussen dat bestaat uit 9 individuele compartimenten. Het kussen is speciaal ontworpen voor kleinere mensen en voor gebruik in pediatrie. Uniek zijn de speciale, kleinere SmartCells die de drukbeheersing en de positioneringseigenschappen zelfs in de kleinste kussenafmetingen garanderen. Door de antropometrie van het bekken van de doelgroep is de dikte van slechts 6 cm uitstekend voor individuele positionering en huidbescherming. Het ontwerp van de compartimenten maakt het mogelijk specifieke delen van het bekken te beïnvloeden. Dit zorgt voor een unieke balans tussen het beschermen van de huid door herverdeling van druk rondom zitbeenknobbels en staartbeen, het stabiliseren van het bekken én het positioneren van de dijbenen. Voor specifieke behoeften kan de SmartCell vulling van elk van de 9 compartiment gemakkelijk worden aangepast.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk	▲▲▲▲△
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲△
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲▲

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲△△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲△△

BESCHIKBARE HOEZEN

Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover en Incotec Cover.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	9 cm
Gemiddeld gewicht	450 gram
Max. gebruikersgewicht	100 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSEN MATEN

- Standaard
- Op aanvraag

Inch	Breedte					
	10	11	12	13	14	
	CM	25	28	30	33	35
10	25	■	■	■	■	■
11	28	■	■	■	■	■
12	30	■	■	■	■	■
13	33	■	■	■	■	■
14	35	■	■	■	■	■