




TriGO^o



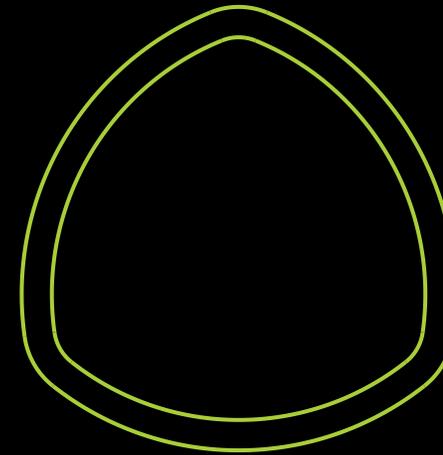

Warum dreieckige Rohre?

Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams haben die dreieckigen Rohre, die die Grundlage Ihres **Trigo** bilden, perfektioniert. Sie verleihen Ihrem Rollstuhl nicht nur ein modernes und einzigartiges Aussehen, sondern haben auch den Vorteil, dass sie Ihren Trigo leichter machen und gleichzeitig die optimale Festigkeit beibehalten.

TRIGO S



Unser Rollstuhl ist in zwei Versionen erhältlich. Zum einen gibt es den **Trigo S**, einen aktiven und faltbaren Stuhl mit in den Rahmen integrierten Fusstützen. Das Design des Trigo S ist aktiv und sportlich. Diese Konfiguration macht den Rollstuhl noch leichter, wobei die maximale Festigkeit erhalten bleibt.





TRIGO T



Es gibt auch ein zweites Modell, den **Trigo T**. Dieser Rollstuhl wurde mit dem gleichen modernen Aussehen entworfen. Der faltbare Rahmen hat wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen. Durch sein Design ist dieses Modell ideal für den einfachen Transport.

DESIGN

VERMEIREN hat den **Trigo** als einen ultramodernen Rollstuhl entworfen, der für jeden Geschmack etwas bietet. Daher kann Ihr Trigo bei der Bestellung vollständig personalisiert werden; vom Rahmen bis zu den Rädern, einschließlich der Armlehnen und einer Palette von mehr als 30 möglichen Farben. Kurz gesagt, es gibt fast so viele verschiedene Trigo-Rollstühle wie Benutzer!





STUFENLOS EINSTELLBAR

Abgesehen von den bei der Bestellung zu wählenden Konfigurationen (Größe, Art der Rückenlehne, Armlehnen, Rahmen, Optionen,...) bleibt Ihr **Trigo** ein dynamischer Stuhl. An jedem Stuhl kann eine große Anzahl von Einstellungen vorgenommen werden, wie z.B. Radsturz, Sitzhöhe,...



EINSTELLBARER RADSTURZ FÜR JEDEN ROLLSTUHL

Dank eines ausgeklügelten Systems kann der Radsturz Ihres **Trigo** direkt an Ihrem Stuhl verändert werden!

Der Radsturz kann in der gewünschten Position von 0° , 2° , 4° oder 6° (je nach Konfiguration) verändert werden.

Ihr Trigo wird mit dem bei der Bestellung gewählten Radsturz geliefert.





EINSTELLUNG DER RADPOSITION

Um den **Trigo** an den Benutzer anzupassen und ihn mehr oder weniger 'aktiv' zu machen, kann die Position der Hinterräder direkt am Rahmen Ihres Rollstuhls eingestellt werden.

Die Hinterräder können nach vorne oder hinten in 8 verschiedene Positionen eingestellt werden. Ihr Trigo wird mit den Rädern in der bei der Bestellung gewünschten Position geliefert.



NEIGUNGSVERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Es gibt 3 mögliche Rückenlehnen für den **Trigo**: eine feste Rückenlehne, eine neigbare Rückenlehne und eine neigbare und klappbare Rückenlehne. Bei der zweiten und dritten Option kann die Neigung der Rückenlehne am Stuhlrahmen leicht eingestellt werden.




ERHÄLTlich IN KINDERGRÖSSEN

Der Rollstuhl **Trigo** wurde so konzipiert, dass er sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist. Aus diesem Grund ist der Trigo in Sitzbreiten von 30 cm bis 50 cm erhältlich. Auch für die kleineren Größen ist eine große Vielfalt an Zubehör und Optionen erhältlich.




OPTIONEN


SCHIEBEGRIFFE

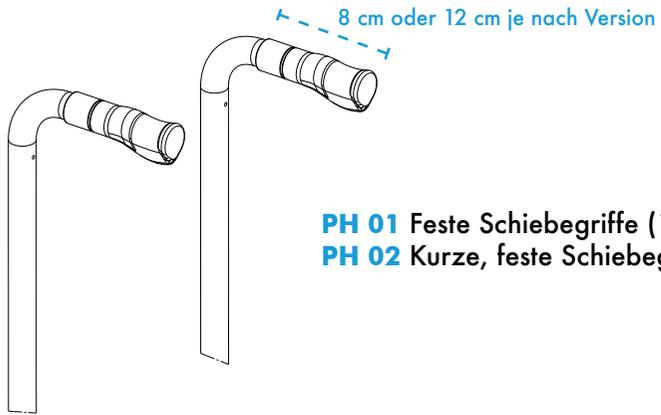


PH 01 Feste Schiebegriffe (12 cm)
PH 02 Kurze, feste Schiebegriffe (8 cm)

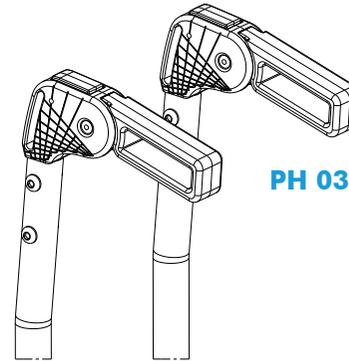


PH 03 Feste, klappbare Schiebegriffe

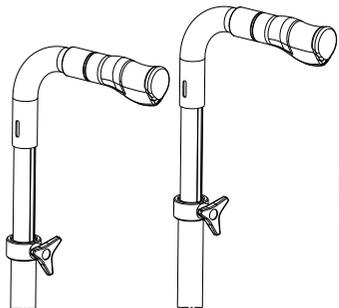

PH 04 Höhenverstellbare Schiebegriffe
(innerhalb der Rückenlehnenrohre)

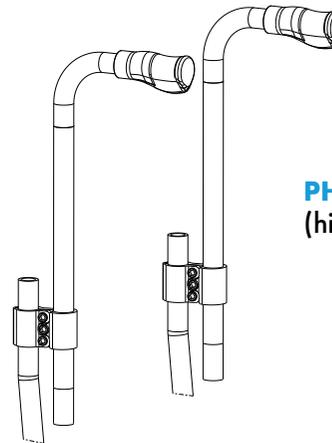

PH 05 Höhenverstellbare Schiebegriffe
(hinter den Rückenlehnenrohren)

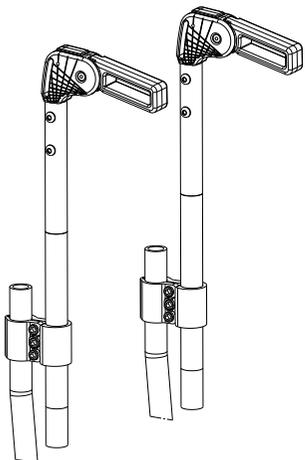

PH 06 Klappbare und höhenverstellbare
Schiebegriffe (hinter den Rückenlehnenrohren)

Die Schiebegriffe **PH 03** und **PH 06** sind voll klappbar.



OPTIONEN


ARMLEHNEN UND KLEIDERSCHUTZ




B82-S von B82-C
Fester
Kleiderschutz
fest einstellbar
Aluminium
oder Karbon




B82 Fester
verstellbarer
Aluminium-
Kleiderschutz

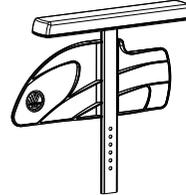

Bi5
höhenverstellbare
Armlehnen

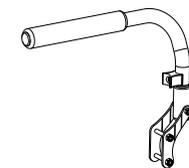

TUBE
Armlehnen,
nach hinten
einklappbar
*(nur bei fester
Rückenlehne)*

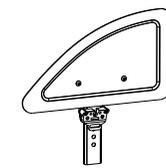


B82S-A
Abnehmbarer
und verstellbarer
Kleiderschutz,
Aluminium




B82L-A
Langer, abnehmbarer
und verstellbarer
Kleiderschutz
mit Spritzschutz
Aluminium



B82-A
Abnehmbarer
und verstellbarer
Kleiderschutz
mit Spritzchutz
Aluminium

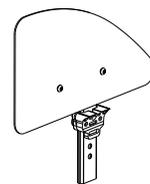


B82S-C
Abnehmbarer
und verstellbarer
Kleiderschutz,
Carbon

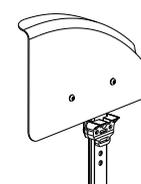


B82-C
Langer, abnehmbarer
und verstellbarer
Kleiderschutz mit
Spritzchutz, Karbon


Erhältlich in Winkeln von 70°, 80° und 90°

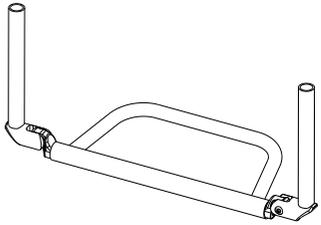


Monoblock-Rohr
aus Aluminium

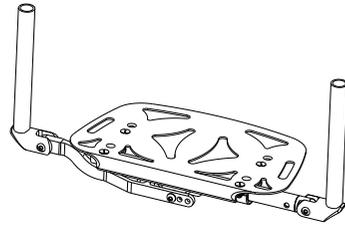


Monoblock, Fußplatte
aus Aluminium, klappbar

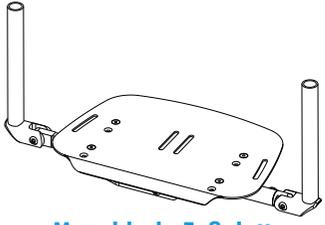


Monoblock, Fußplatte
aus Carbon, klappbar

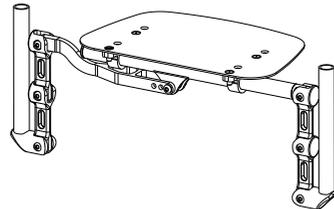

Monoblock, mit
höherer Fußplatte

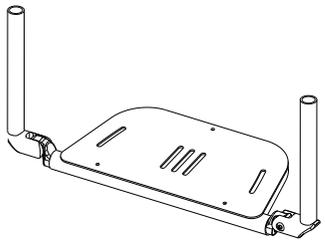

Monoblock, mit
einklappbarer Fußplatte

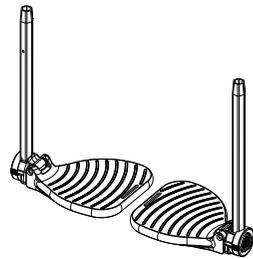


Getrennte Fußplatten




 **TRIGO S**

OPTIONEN


FUSSSTÜTZE

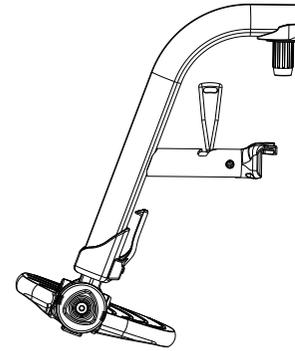


70°

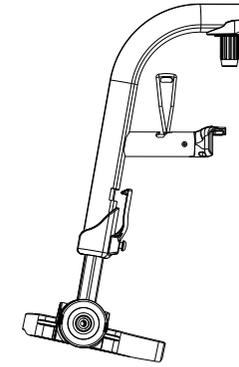

80°

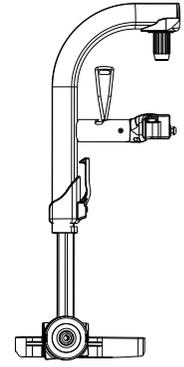

90°

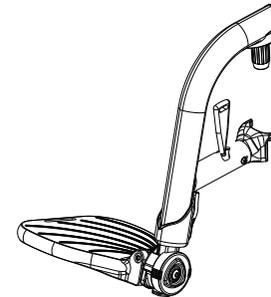

BA6-Fußstützen,
um 5 cm gekürzt



 **TRIGO T**

OPTIONEN

RÄDER

Vorderräder



Standard schwarz
3", 4", 5", 6"



Transparent
3", 4", 5", 6"



Aluminium silber
3", 4", 5"



Aluminium blau
3", 4", 5"



Aluminium rot
3", 4", 5"



Carbon
4", 5"



LED
4", 5"

Hinterräder



Standard-Räder
18"



Design-Räder
20", 22", 24", 26"



**Spirit Rad mit
Alu-Radnabe**
24"



**Spirit Rad mit roter
Alu-Radnabe**
24"



**Spirit Rad mit blauer
Alu-Radnabe**
24"



Off-road Räder
24"



Räder Right Run schwarz
erhältlich mit Design- und
Spirit-Rädern



Räder Marathon Plus
erhältlich mit Design- und
Spirit-Rädern

OPTIONEN


BREMSEN



Druck- oder ZiehbremSEN




SportbremSEN

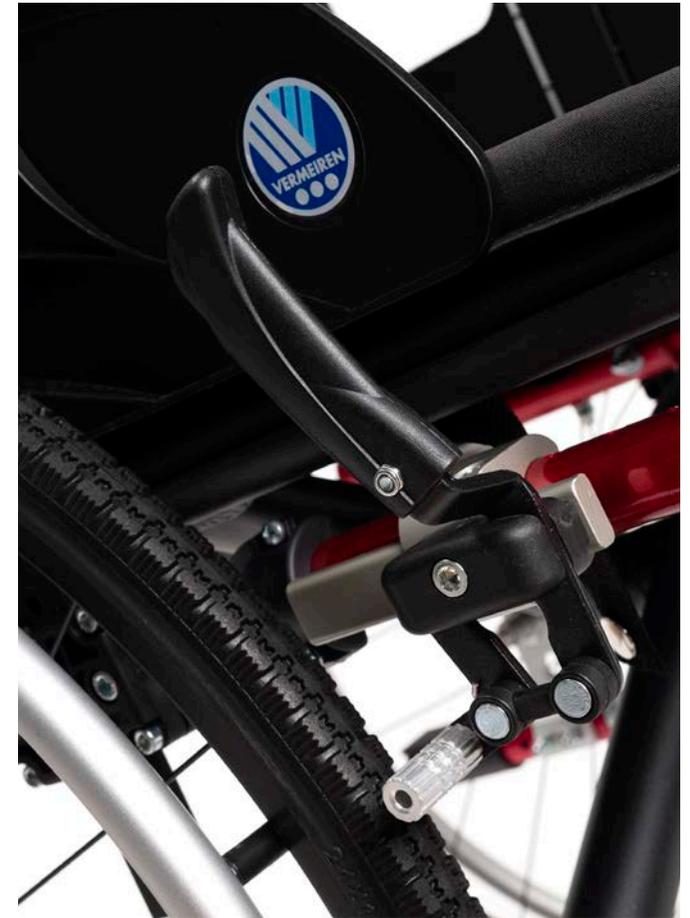


Konventionelle BremSEN
mit Klappgriffen (B40)

OPTIONEN


OPTIONEN UND ZUBEHÖR

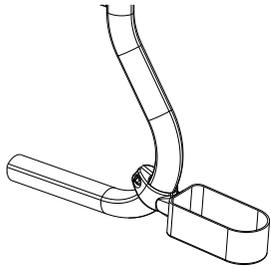


Krückenhalter
links oder rechts
B31L oder B31R

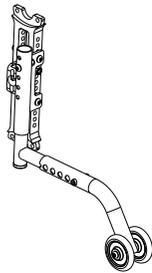

Kippschutz
links oder rechts
B78L oder B78R

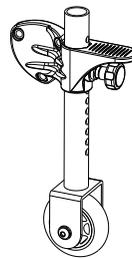


Reiserolle
B86

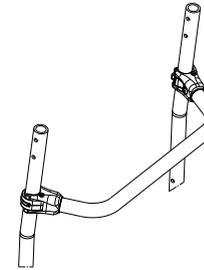


Stabilisierungsstange
für Rückenlehne
B90



Neoflex-Gurtsystem
Alle möglichen Lösungen finden
Sie auf unserer Webseite:
www.vermeiren.ch

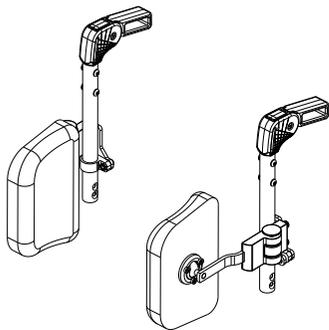


Seitenpelotte
links oder rechts, (gross)
L04 L oder L04 R

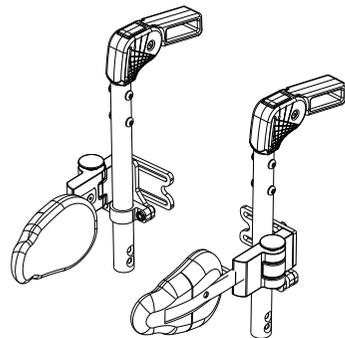

Seitenpelotte
links oder rechts, (klein)
L04S L oder L04S R



Trommelbremse
24» x 1/3 8» graue Räder

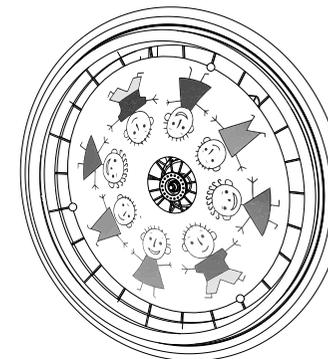


Speichenschutz
Alle möglichen Modelle finden
Sie auf unserer Webseite:
www.vermeiren.ch

Weitere Optionen und Zubehör auf unserem Bestellbogen

MEHRERE FARBOPTIONEN



C4M - leuchtend rot matt
C4G - leuchtend rot glänzend

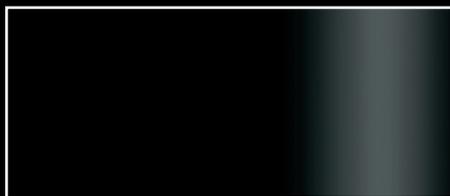

C5M - schwarz matt
C5G - schwarz glänzend



C8M - gelb matt
C8G - gelb glänzend




C29M - leuchtend silber matt
C29G - leuchtend silber glänzend




C53M - orange matt
C53G - orange glänzend



C55M - inox matt
C55G - inox glänzend

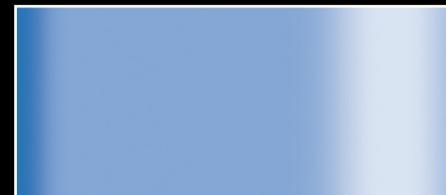

C56M - blau metallic matt
C56G - blau metallic glänzend

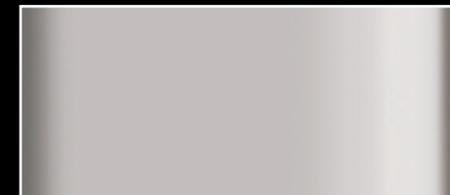

C59M - champagner matt
C59G - champagner glänzend



C71G - dunkelblau metallic glänzend (mit Aufpreis)



C72G - rot metallic glänzend (mit Aufpreis)



C73G - grün metallic glänzend (mit Aufpreis)



C76M - weiss matt
C76G - weiss glänzend



C78G - hellblau glänzend (mit Aufpreis)



C79M - softblau matt
C79G - softblau glänzend



C85M - Vhellgrün matt
C85G - hellgrün glänzend




C87M - melonengelb matt
C87G - melonengelb glänzend



C88M - gold matt
C88G - gold glänzend



C89M - kupfer matt
C89G - kupfer glänzend

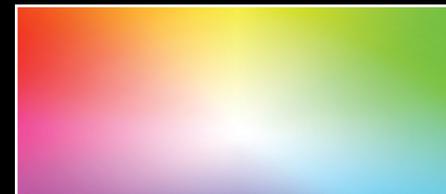

**Und viele andere Farben
auf Ihren Wunsch
(mit Aufpreis)**

TECHNISCHE DATEN



Sitzbreite : **300 - 500 mm** (in Schritten von 20 mm)

Gesamtbreite (Sturz 0°) : **460 - 660 mm**

Sitztiefe : **300 - 500 mm** (in Schritten von 20 mm)

Sitzhöhe : **380 - 510 mm** (je nach Konfiguration)

Gesamtgewicht : **ab 10 kg** (je nach Konfiguration)

Maximales Benutzergewicht : **70 oder 130kg** (je nach Konfiguration)

Möglichkeit einer umklappbaren Rückenlehne : **ja**

Rückenlehnenhöhe : **250 - 510 mm** (je nach Konfiguration)

Erhältliche Vorderräder in Grössen : **3", 4", 5", 6"**

Erhältliche Hinterräder in Grössen : **18", 20", 22", 24", 26"**

Radsturz : **0° - 6°** (direkt am Stuhl einstellbar)

Erhältliche Bezüge : **Nylon, Wabe, Mesh 3**

Abmessungen in mm, Gewicht in kg. Masstoleranz: 15 mm, 1.5 kg; 1.5°

Anmerkungen

VERMEIREN

VERMEIREN SCHWEIZ

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)

Tel.: +41(0)33 335 14 75

Fax: +41(0)33 335 14 67

@ : info@vermeiren.ch

www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Fachhandler in Ihrer Nähe.

Alle Rechte, auch an der Übersetzung, vorbehalten. • Kein Teil der Gebrauchsanweisung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Ausgabe März 2020.

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für die neueste Version siehe: www.vermeiren.ch

TriGO^o