




VICAIR®

4

LE COUSSIN DE
FAUTEUIL ROULANT
OFFRANT LA PLUS
HAUTE PROTECTION
DE LA PEAU LE
PLUS FACILE À
UTILISER

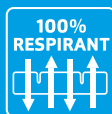

 PRODUIT
 100 % AUX PAYS-BAS

relief by air

FACILITE EXTREME D'UTILISATION ET HAUTE PROTECTION DE LA PEAU

- ▶ Protection cutanée de haute qualité et redistribution uniforme de la pression
- ▶ Grande facilité d'utilisation
- ▶ Soutient le bassin et les cuisses pour une position assise stable



Sûr à utiliser et toujours bon:
haut = bas; gauche = droite;
avant = arrière.

4 compartiments identiques

Le Vicair 4 est un coussin de siège pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Il se compose de quatre compartiments séparés identiques qui offrent confort, protection de la peau de haute qualité et maintien de la posture. Le Vicair 4 est conçu pour que l'utilisateur s'enfonce dans le coussin et soit enveloppé par le remplissage SmartCell. Cela garantit une posture assise stable et aide à protéger la peau en répartissant uniformément la pression et en minimisant le cisaillement. Le Vicair 4 s'adapte automatiquement aux contours du corps, même avec une légère inclinaison du bassin.


Le Vicair 4 est extrêmement simple et sûr à utiliser: le coussin repose toujours correctement. Les quatre côtés, le haut et le bas sont identiques. L'oreiller est entièrement lavable en machine jusqu'à max.60 °C. Aucune pompe ou autre équipement n'est nécessaire pour installer le Vicair 4 ou l'utiliser. C'est un oreiller pour une utilisation sûre à long terme, la vérification quotidienne n'est pas nécessaire: des centaines de SmartCells créent plusieurs couches entre l'utilisateur et le siège.

		Largeur				
Inch	CM	16	17	18	19	20
16	40	■				
17	43		■			
18	45			■		
19	48				■	
20	50					■

SPECIFICITES TECHNIQUES

Epaisseur	8 cm / 3¼"
Poids moyen	0,8 kg / 1.8 lbs
Poids utilisateur maximum	250 kg / 551 lbs
Tailles disponibles	Voir tableau des tailles

- Disponible
- Pas disponible

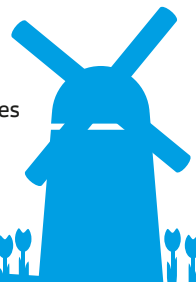



MICROCLIMAT CONTROLÉ

Le microclimat cutané est un facteur de risque indirect supplémentaire pour le développement des escarres. Le microclimat est affecté par la température et l'humidité à la surface de la peau. Il est donc recommandé de garder la peau sèche et fraîche. Le coussin Vicair 4 est entièrement composé d'un tissu perforé. Cela permet à l'excès d'humidité de s'écouler de la peau. L'air peut également facilement entrer, sortir et traverser le coussin à travers la structure ouverte, réduisant ainsi l'accumulation de chaleur. Dans l'ensemble, il garde la peau aussi sèche et fraîche que possible dans toutes les conditions.

LAVABLE EN MACHINE

Asseyez-vous toujours sur un coussin propre et hygiénique. Cela n'a jamais été aussi simple! Quand quelqu'un fait un usage intensif d'un coussin de siège pendant une longue période, il peut et va se salir. C'est donc important qu'il peut être nettoyé bien et facilement. Le Vicair 4 est entièrement lavable en machine jusqu'à 60 ° C max. Aucune machine, procédure ou désinfectant spécial n'est nécessaire. Seule une machine à laver et un peu de détergent. Après le lavage, laissez l'oreiller sécher à l'air pendant quelques heures, puis il est à nouveau prêt à être utilisé.



ÉTIQUETTE COLORÉE, SI FACILE

Le coussin et la housse sont identiques. Etiquette de couleur attachée, il est donc facile de voir si le coussin et la housse sont de la même taille, sans contrôler les informations sur les étiquettes des produits. Ceci est particulièrement utile dans un environnement où plusieurs coussins Vicair 4 sont en cours d'utilisation. Le code couleur est unique pour ce modèle de coussin Vicair.

Protection de la peau, maintien de la posture et convivialité. C'est pourquoi Vicair est "The Perfect Package"!
- Utilisateurs Vicair dans le monde

LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DE VICAIR

L'air est le meilleur moyen pour garantir la répartition des pressions. Vicair a capturé cet air dans les SmartCells, répartis par centaines dans chaque coussin compartimenté. Les Smartcells se déplacent individuellement, ajustant lentement le coussin anti-escarres aux contours du corps. On obtient une meilleure répartition des pressions, un positionnement optimal et un excellent confort d'assise pour l'utilisateur.

La technologie Vicair a été développée en coopération avec le Centre de rééducation Reade d'Amsterdam et récompensée par le Grand Prix du Salon des Inventions à Genève, en Suisse.




PRÊT À L'EMPLOI

Le coussin Vicair est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage



100 % LAVABLE EN MACHINE

Le coussin, SmartCells inclus, est entièrement lavable en machine à 60 °C

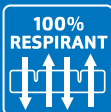

100% RESPIRANT

La structure aérée du coussin offre une régulation optimale de la température et de l'humidité



FORME STABLE

Ce modèle de coussin conserve sa forme, offrant une meilleure protection à l'utilisateur



Garantie à vie grâce à sa dernière génération de SmartCells Vicair



VICAIR®

Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
T + 31 (0)75 642 99 99
info@vicair.com
vicair.com

Suivez-nous sur



COORDONNÉES DU DISTRIBUTEUR



T: +32(0)3 620 20 20 F: +32(0)3 666 48 94
info@vermeiren.be
www.vermeiren.be