



Verso

Fauteuil roulant électrique
léger et réglable avec batterie
au lithium amovible.

VERMEIREN
we care for you

Verso

Fauteuil roulant électrique
léger et réglable avec batterie
au lithium amovible.

Le Verso est un fauteuil roulant électrique polyvalent et maniable. Sa conception légère en fait le fauteuil roulant idéal pour les utilisateurs en déplacement qui souhaitent augmenter leur mobilité sans sacrifier le confort. Grâce à notre large gamme d'options, la Verso offre à son utilisateur une adaptabilité remarquable.

Créé en combinant la durabilité d'un cadre de fauteuil roulant manuel avec les fonctionnalités avancées de deux roues arrière motorisées, le Verso est le choix parfait pour un fauteuil électrique confortable et léger. La batterie au lithium peut être retirée pour une charge facile pour plus de commodité.

VERMEIREN
we care for you









Accoudoirs
amovibles et
réglables.

Poignées de poussée
réglables en hauteur
5 positions.

Dossier réglable
en hauteur avec 4
sangles de tension.

Housse de coussin 3D
NET respirante.

Repose-pieds pliable
et amovible, réglable
en longueur.

Batterie au lithium
amovible, équipée
d'un verrou de sécurité.

Profondeur d'assise
réglable de 42 à 48 cm.

FACILE À UTILISER

Simple, mais parfait. Le Verso a tout pour plaire. Démontez votre fauteuil roulant en quelques secondes. Toutes les pièces sont faciles à transporter et pas trop lourdes pour être facilement transportées dans une voiture. Le montage est facile avec notre système Click&Drive. Aucun outil requis, il suffit de brancher votre batterie et c'est parti ! Grâce à notre batterie amovible, vous pouvez recharger votre fauteuil où et quand vous le souhaitez.



Verso est compatible pour le transport aérien !

Éteignez simplement la batterie et votre fauteuil roulant peut voler. Reportez-vous toujours au manuel du propriétaire pour les instructions de transport.

FACILE POUR VOYAGER

Une caractéristique unique du Verso est le bloc moteur et la batterie amovible. Détachez votre fauteuil roulant de la batterie et de la cale de roue pour un rangement et un transport facile. Le cadre et la "partie entraînée" de Verso ont une roue supplémentaire pour s'assurer qu'aucune pièce ne peut être endommagée par la déconnexion. Ils facilitent également les manœuvres. Le siège peut être facilement plié, tout comme l'un de nos autres fauteuils roulants manuels populaires. Parfait pour le transport dans le coffre de la voiture ou pour le stockage à la maison.



POIDS LÉGER

31,3 kg

Poids total



16,2 kg

Partie la plus lourde



9,9 kg

Poids d'expédition
(sans coussin, repose-pieds et accoudoir)

Nous nous soucions de vous... et de votre dos.

Le Verso est un fauteuil roulant électrique très léger avec seulement 16,2 kg pour la partie motorisée et 9,9 kg de poids de transport pour le châssis principal. Facile à soulever sans aucune charge.





EXPÉRIENCE DE CONDUITE



Commande

La commande **P&G** est simple et intuitive. Avec son indicateur de niveau de batterie, son variateur de vitesse et un joystick agréable à utiliser, elle est très facile à prendre en main. Une programmation est possible pour personnaliser quelques paramètres et adapter la conduite à votre profil.

La commande se détache facilement lors du démontage du **Verso**.



Jusqu'à 21 km

Découvrez une autonomie plus longue avec la batterie de 17,5 Ah. Choisissez la batterie interchangeable qui correspond à votre envie d'évasion.



6 km/h

6 km/u, le Verso se déplace à la vitesse idéale pour des conversations et des promenades confortables avec vos amis et votre famille.



BATTERIE & MOTEUR

La batterie Lithium Li-ion (disponible en 12,8 Ah ou 17,5 Ah) dispose d'un indicateur d'état de la batterie et est légère. Déverrouillez simplement votre batterie avec votre propre clé antivol pour recharger votre batterie où vous voulez. Pas le temps de recharger ? Une batterie supplémentaire est disponible en option.

La batterie est idéalement située à l'arrière de votre fauteuil roulant, vous pouvez donc facilement la retirer pour la recharger ou pour vérifier rapidement l'état de la batterie. Avec 2 moteurs de 250 W et des pneus PU noirs de 12", le Verso rivalise avec les autres dans sa catégorie. Un excellent choix durable pour un fauteuil roulant électrique à usage quotidien.

Batterie Li-ion
amovible

12,8 Ah - 24 V
17,5 Ah - 24 V

Moteurs
2 x 250 W





CAUTION Store in cool and dry place
Do not expose the product to fire, water or moisture

100% 80% 50% 20%

□

A close-up photograph of a black motorized bicycle handlebar. A bright blue rectangular plate is mounted on the handlebar, featuring the word 'Verso' in a bold, black, sans-serif font. The background is a blurred view of the bicycle's frame and components, including a blue pedal and a black tire.

CONCEPTION & COULEUR

Avec un design élégant et des touches de couleurs amusantes, le Verso peut être personnalisé selon vos préférences tout en étant moderne et attrayant. Les accents de couleur ont un double objectif, car ils permettent de trouver facilement les poignées de la partie motorisée. Pour plus de sécurité, nous avons ajouté des réflecteurs.

COLORED

Les couleurs sont une expérience personnelle, tout comme votre Verso. Choisissez la combinaison de couleurs qui convient le mieux à votre style.

Choisissez la couleur de votre monture entre le blanc brillant et le noir brillant et jouez avec les accents de couleur pour en faire votre propre style.

Accents de couleur





HAUTEMENT CONFIGURABLE

Personnalisez votre Verso pour vous. Le Verso est une chaise hautement configurable qui combine la large et étendue gamme d'options de **VERMEIREN** et notre expertise dans les fauteuils roulants électriques. Choisissez ce qui vous convient le mieux !

Deux en un

TRANSFORMEZ LE **VERSO** EN FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Kit roues arrières 24"


Le Verso offre une option unique pour les personnes qui ont besoin à la fois d'un fauteuil roulant manuel et d'un fauteuil roulant électrique. Avec notre paire de roues 24", vous pouvez facilement basculer entre la conduite manuelle ou motorisée.

Branchez et roulez !



OPTIONS

Avec sa large gamme d'options, le Verso répondra à tous vos besoins ainsi qu'à ceux de votre accompagnant. Configurez votre modèle grâce à notre gamme d'équipements !

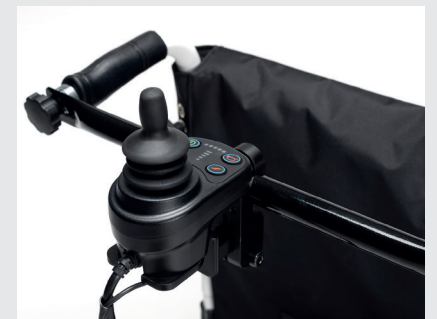

Pour plus d'options, consulter le bon de commande.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Largeur totale	Largeur d'assise + 17cm
■ Longueur totale	1078 mm
■ Hauteur d'assise	521 mm
■ Largeur d'assise	440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 à 480 mm
■ Hauteur de dossier	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Batteries	12,8 Ah - 24 V 17,5 Ah - 24 V
■ Puissance	2 x 250 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	15 km 21 km
■ Poids	31,3 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg

* Mesures en mm et kg. Une tolérance dimensionnelle et pondérale de 15mm ou 1,5kg est admise.
Sous réserve de modifications techniques. Photos d'illustration non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Verso

Fauteuil roulant électrique
léger et réglable avec batterie
au lithium amovible

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



E.R.: VERMEIREN Group, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 12/2023

Pour plus d'informations, prenez contact
avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you