


## Technische informatie Forest 3



2x12V-50Ah 2x12V-80Ah	2x350W	6 km/u 10 km/u 14 km/u	50km 42km 37km	9°	100	1320
--------------------------	--------	------------------------------	----------------------	----	-----	------

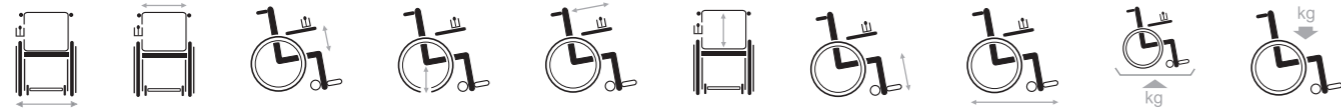

595	400	242-350	430-480	420-520	630	271-391	1120	139	130
610	450	242-350	(vermelden bij bestelling)	420-520	630	271-391	1120	139	130
650	500	242-350		420-520	630	271-391	1120	139	130

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

## Opties



L44 - naspanbare rug SE26 - duwstang SE28 - bagagerek SE16 - plexi zijplaten  
SE02 - tafelbesturing L58 - hoofdsteen SE09 - extra controller SE04 - kinbesturing

Dit is slechts een klein fragment van al onze mogelijke opties. Contacteer onze vertegenwoordigers voor extra mogelijkheden.

## Kleuren

Forest 3 wordt aangeboden in diverse kleuren zowel in een matte als in een glanzende uitvoering.



SE42 - lift

# Forest 3

Zuiver rijplezier



## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



Voorbehouden technische wijzigingen

Information for the visually impaired is available upon request. - R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 04/2019



Abgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit





## Compact, betrouwbaar en krachtig

FOREST 3 is de perfecte metgezel voor gebruikers die een compacte rolstoel willen voor binnengebruik en een krachtpaster voor buitengebruik. **Prestaties, comfort en aanpassingsvermogen** zijn 3 woorden die een FOREST 3 het beste typeren.

### Prestaties & techniek

#### 1 Stabiliteitsas

De vier wielen van de Forest 3 blijven steeds in contact met de grond ongeacht de oneffenheden van het terrein (100 mm).

#### 2 Bodemvrijheid tot 7,4 cm

#### 3 Regelbare schokdempers achteraan



#### 4 Krachtige motoren van 350 W voor de 10, 14 en 6 km/u versie

Standaard met **80 A/h batterijen** voor de 10 of 14 km/u versie en **50 A/h batterijen** voor de 6 km/u versie.



De stabiliteitsas vooraan absorbeert niveauverschillen tot 10 cm en zorgt zo voor een veilig en comfortabel rijcomfort. De optionele **V-STAB** technologie laat de gebruiker in een rechte lijn rijden, zelfs op oneffen ondergronden, zonder veel te hoeven corrigeren. De gebruiker zal het ongeëvenaarde comfort van de FOREST 3 dankzij de voorgevormde kussens en rug waarderen die garant staan voor een ideaal rijgenot.



### Comfort

- 1 **Voorgevormde kussens** voor zit en rug voor een optimaal zitcomfort en eenvoudig onderhoud.
- 2 **Elektrische of manuele verstelling** van de zit en rug.
- 3 **Stabiliteitsas** vooraan en schokdempers zorgen voor een optimaal rijcomfort.

### Aanpasbaarheid

- 1 **Armsteunen** die wegklapbaar zijn, regelbaar in hoogte en breedte, diepte en hoek. Een vernuftig systeem voor de verstelling van de armsteunen.



- 2 **Inclineerbare armleggers**, regelbaar in hoogte en in diepte.
- 3 **Wegklapbare besturing** die op een eenvoudige wijze zowel naar binnen als naar buiten toe kan zwenken.
- 4 **Aanpassing van de zitdiepte** door verplaatsing van de rug.