




TriGO^o



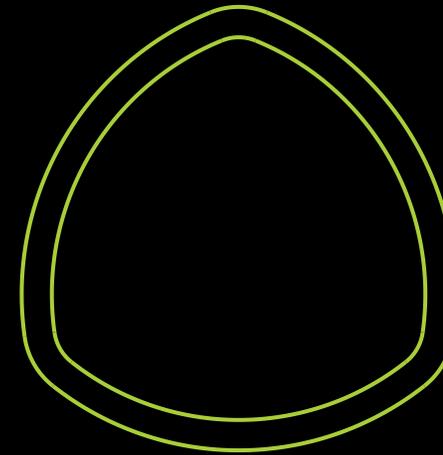

Warum dreieckige Rohre?

Von unserem Forschungs- und Entwicklungsteam wurden die dreieckigen Rohre so konzipiert, dass diese die Basis des **Trigo** bilden. Sie verleihen Ihrem Rollstuhl nicht nur ein modernes und einzigartiges Aussehen, sie haben auch den Vorteil, dass sie den Trigo leichter machen und gleichzeitig für die optimale Stabilität sorgen.

TRIGO S



Unser Rollstuhl ist in zwei Versionen erhältlich: Der **Trigo S**, ein adaptiver Faltrollstuhl mit integrierten Fußstützen am Rahmen. Das Design des Trigo S ist aktiv und sportlich. Diese Konfiguration macht den Rollstuhl noch leichter wobei gleichzeitig die maximale Festigkeit beibehalten wird.





TRIGO T



Das zweite Modell: Der **Trigo T**. Dieser Rollstuhl wurde mit dem gleichen modernen Aussehen entworfen. Der klappbare Rahmen hat abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen. Sein Design macht dieses Modell ideal für den einfachen Transport.

DESIGN

VERMEIREN hat den **Trigo** als hochmodernen Rollstuhl für jeden Geschmack entworfen. Ihr Trigo kann bei der Bestellung vollständig personalisiert werden. Vom Rahmen bis zu den Rädern, einschließlich der Armlehnen und einer Auswahl von mehr als 30 möglichen Farben. Kurz gesagt, es gibt fast so viele verschiedene Trigo-Rollstühle wie es Benutzer gibt!





INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

Abgesehen von den Konfigurationen, die bei der Bestellung ausgewählt werden müssen (Größe, Art der Rückenlehne, Armlehnen, Rahmen, Optionen usw.), bleibt Ihr **Trigo** ein dynamischer Stuhl. An jedem Stuhl können auch im Nachhinein zahlreiche Einstellungen vorgenommen werden, z. B. Radsturz, Sitzhöhe,...



EINSTELLBARER RADSTURZ FÜR JEDEN ROLLSTUHL

Dank eines ausgeklügelten Systems kann der Radsturz Ihres **Trigo** direkt auf Ihrem Stuhl geändert werden! Der Sturz kann in der gewünschten Position von 0° , 2° , 4° oder 6° geändert werden (je nach Konfiguration). Ihr Trigo wird mit dem Sturz geliefert, der bei der Bestellung ausgewählt wurde.





POSITIONIERUNG DER RÄDER

Um den **Trigo** an den Benutzer anzupassen und diesen mehr oder weniger «aktiv» zu machen, kann die Position der Hinterräder direkt am Rahmen Ihres Rollstuhls eingestellt werden. Die Hinterräder können vorwärts oder rückwärts in 8 verschiedene Einstellungen positioniert werden. Ihr Trigo wird mit den Rädern in der bei der Bestellung angegebenen Position geliefert.



RÜCKENNEIGUNG

Es gibt 3 mögliche Rückenlehnen für den **Trigo**: eine feste Rückenlehne, eine neigbare Rückenlehne und eine neigbare und klappbare Rückenlehne. Bei der zweiten und dritten Option kann die Neigung der Rückenlehne am Rahmen leicht eingestellt werden.




ERHÄLTlich IN KINDERGRÖSSEN

Der **Trigo**-Rollstuhl wurde so konzipiert, dass er sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist. Aus diesem Grund ist der Trigo in den Sitzbreiten von 30 cm bis 50 cm erhältlich. Auch für die kleineren Größen steht eine Vielzahl von Zubehör und Optionen zur Verfügung.




OPTION


SCHIEBEGRIFFE

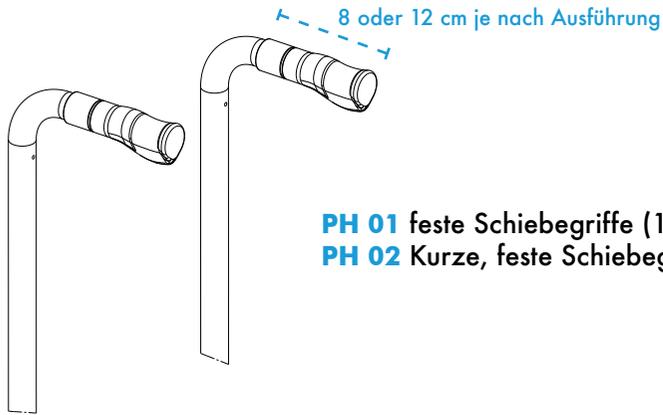


PH 01 feste Schiebegriffe (12 cm)
PH 02 Kurze, feste Schiebegriffe (8 cm)

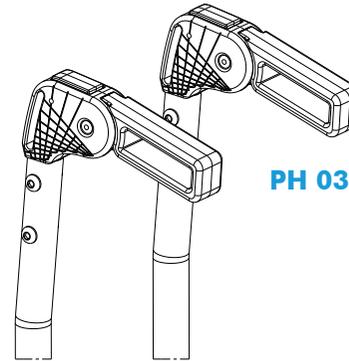


PH 03 Feste, faltbare Schiebegriffe

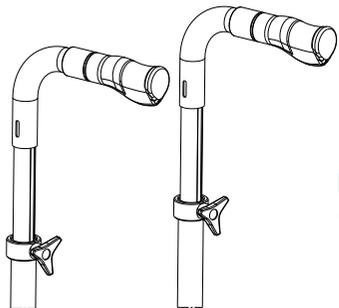

PH 04 Höhenverstellbare Schiebegriffe
(in den Rückenrohren)

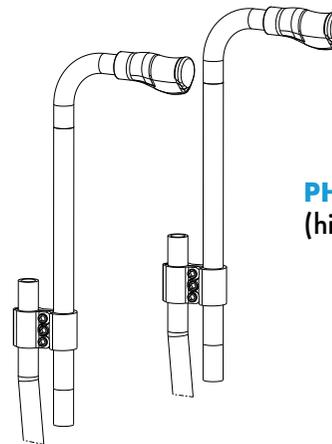

PH 05 Höhenverstellbare Schiebegriffe
(hinter Rückenlehne)

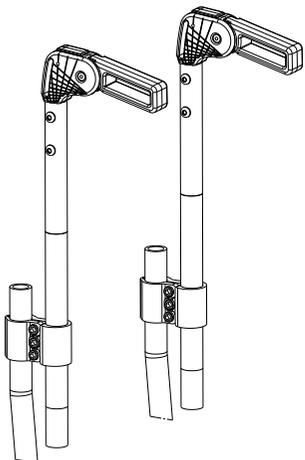

PH 06 Klappbare und höhenverstellbare
Schiebegriffe (hinter Rückenlehne)

Die Druckgriffe **PH 03** und **PH 063** sind vollständig faltbar.




OPTION


ARMLEHNEN UND KLEIDERSCHUTZ




B82-S und B82-C
fester und verstellbarer seitlicher Kleiderschutz, Aluminium oder Carbon

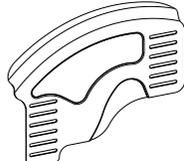


B82
fester und verstellbarer Kleiderschutz, Aluminium mit Kotflügel

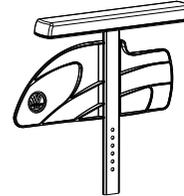

Bi5
höhenverstellbare Armlehnen

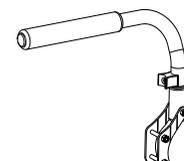

TUBE
Armlehnen, nach hinten versenkbar (nur mit festem Rücken)

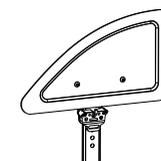

B82S-A
Abnehmbarer und verstellbarer Kleiderschutz aus Aluminium




B82SL-A
Langer, abnehmbarer Kleiderschutz aus Aluminium




B82L-A
Langer, abnehmbarer und verstellbarer Kleiderschutz mit Kotflügel, Aluminium



B82-A
Abnehmbare und verstellbare Kleiderschutzvorrichtungen mit Kotflügel aus Aluminium

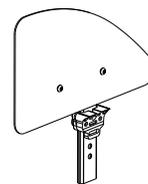


B82S-C
Abnehmbare und verstellbare Kleiderschutzvorrichtungen aus Carbon

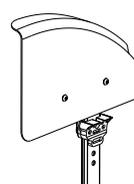


B82-C
Langer, abnehmbarer und verstellbarer Kleiderschutz mit Kotflügel, Carbon


Erhältlich in den Winkeln von 70°, 80° und 90°

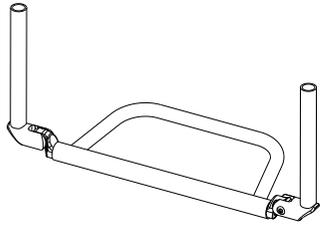


Monoblockrohr
aus Aluminium

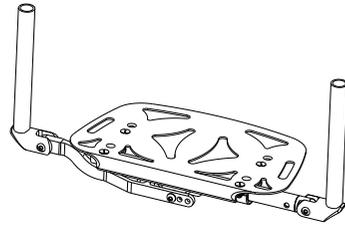


Monoblock, Fußplatte
aus Aluminium, faltbar

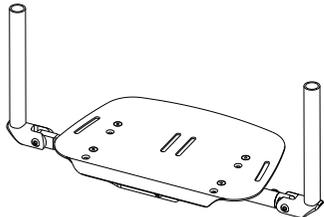


Monoblock, Fußplatte
aus Carbon, faltbar

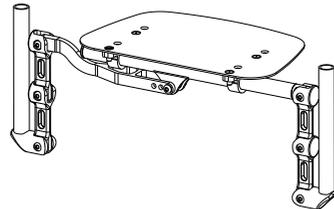

Monoblock mit
höherer Fußplatte

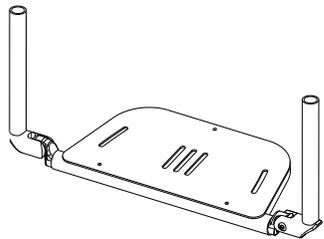

Monoblock mit
einziehbarer Fußplatte

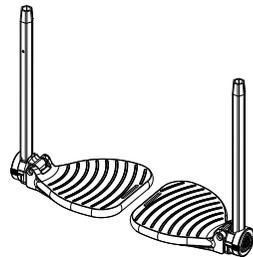


Separate Fußplatten




S TRIGO S

OPTIONEN


FUßSTÜTZEN

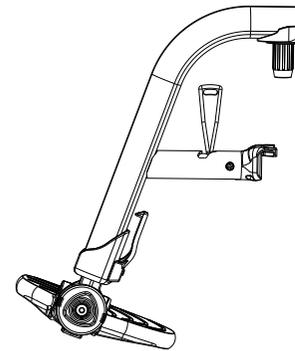


70°

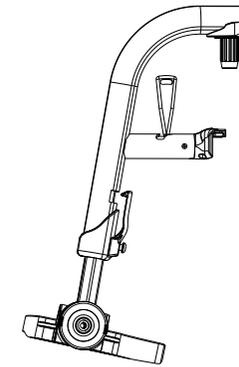

80°

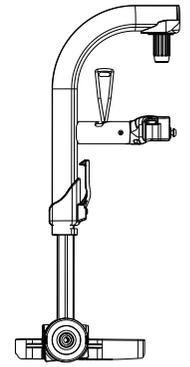

90°

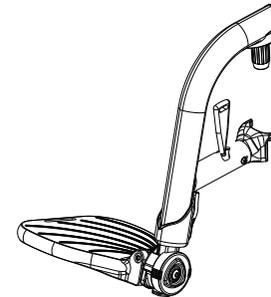

BA6 Fußstützen,
um 5 cm gekürzt



T TRIGO T

OPTIONEN

RÄDER

Vorderräder



Standard schwarz
3", 4", 5", 6"



Transparent
3", 4", 5", 6"



Aluminium silber
3", 4", 5"



Aluminium blau
3", 4", 5"



Aluminium rot
3", 4", 5"



Carbon
4", 5"



LED
4", 5"

Hinterräder



Standardräder
18"



Design Räder
20", 22", 24", 26"



Spirit Räder aluminium
24"



Spirit Räder rot
24"



Spirit Räder blau
24"



Off-Road Räder
24"



Richt Run schwarze Reifen
erhältlich mit Design-
und Spirit-Rädern



Marathon Plus Reifen
erhältlich mit Design-
und Spirit-Rädern

Maßeinheit: Zoll

OPTIONEN


BREMSEN



Push and Pull




Sportbremsen

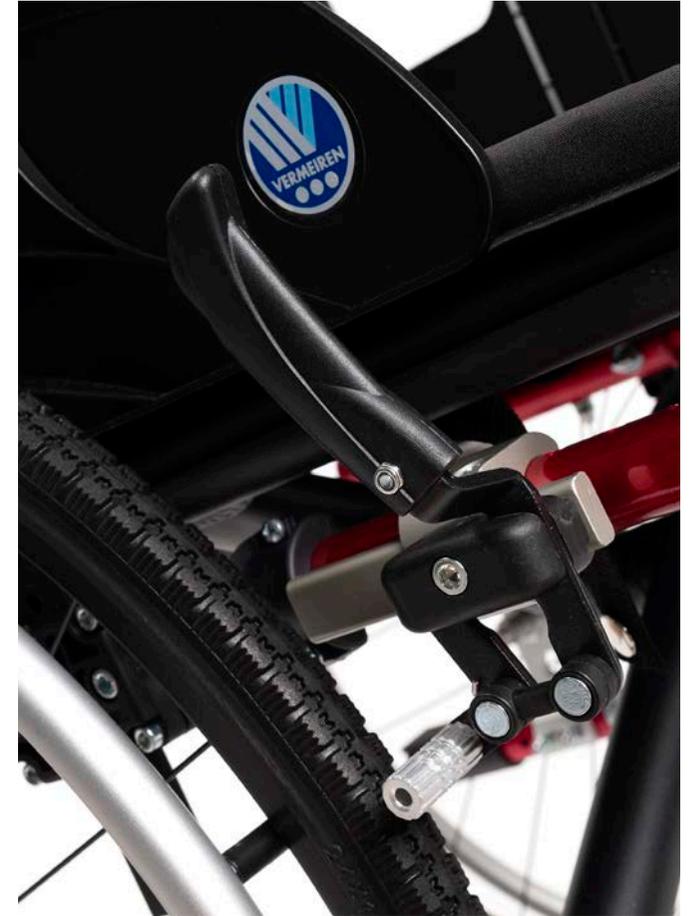


Traditionelle Bremsen mit
abklappbarem Griffen (B40)

OPTIONEN


OPTIONEN UND ZUBEHÖR

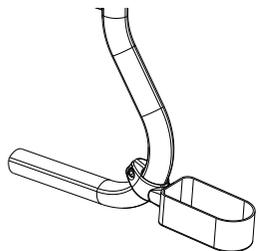


**Krückenhalter
links oder rechts**
B31L oder B31R

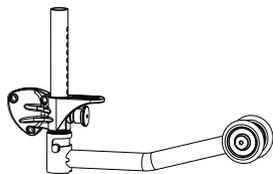

**Kippschutz
links oder rechts**
B78L oder B78R

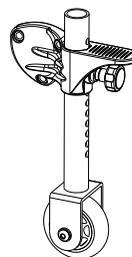


Reiseräder
B86

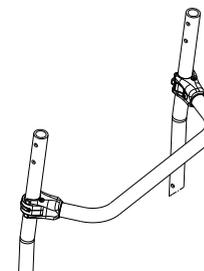


**Stabilisierungsstange
für Rückenlehne**
B90



Neoflex-Gurte
Konsultieren Sie alle möglichen
Lösungen auf unserer Website
www.vermeiren.at

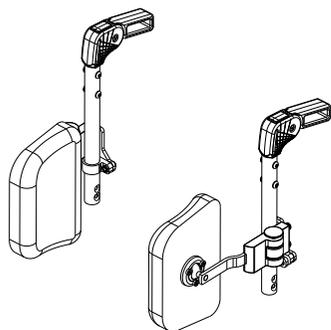

**Seitenstützen links
oder rechts (groß)**
L04 L oder L04 R

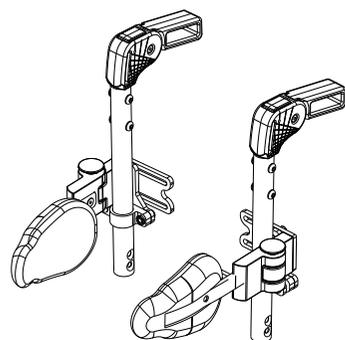

**Seitenstützen links
oder rechts (klein)**
L04S L oder L04S R



Trommelbremse
24» x 1/3 8» graue Räder


Speichenschutz
Konsultieren Sie alle möglichen
Modelle auf unserer Website
www.vermeiren.at

Weitere Optionen und Zubehör finden Sie auf unserem Bestellformular

MEHRERE FARBOPTIONEN!



C4M - Rot matt
C4G - Rot glänzend

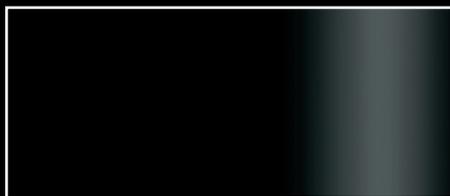

C5G - Schwarz matt
C5M - Schwarz glänzend



C8M - Gelb matt
C8G - Gelb glänzend




C29M - Silber matt
C29G - Silber glänzend




C53M - Orange matt
C53G - Orange glänzend



C55M - Inoxgray matt
C55G - Inoxgray glänzend

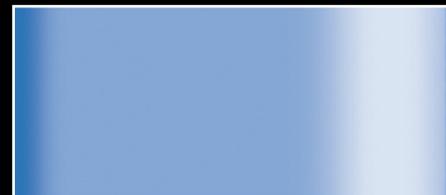

C56M - Blaugrau matt
C56G - Blaugrau glänzend

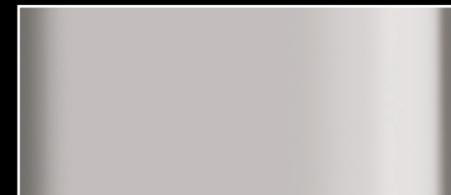

C59M - Champagner matt
C59G - Champagner glänzend



C71G - Metallic-Blau



C72G - Metallic-Rot



C73G - Metallic-Grün



C76M - Weiß matt
C76G - Weiß glänzend



C78G - Softblau glänzend



C79M - Hellblau matt
C79G - Hellblau glänzend



C85M - Grasgrün matt
C85G - Grasgrün glänzend




C87M - Melonenorange matt
C87G - Melonenorange glänzend



C88M - Gold matt
C88G - Gold glänzend



C89M - Kupfer matt
C89G - Kupfer glänzend

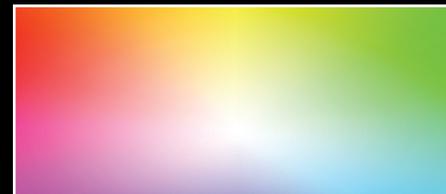

**Und Dutzende anderer Farben
auf Ihre Anfrage
(mit Aufpreis)**

TECHNISCHE DATEN



Sitzbreite : **300 bis 500 mm** (Schritte von 20 mm)

Gesamtbreite (Sturz 0°) : **460 bis 660 mm**

Sitztiefe : **300 bis 500 mm** (Schritte von 20 mm)

Sitzhöhe : **380 bis 510 mm** (je nach Konfiguration)

Gesamtgewicht : **ab 10 kg** (je nach Konfiguration)

Maximales Benutzergewicht : **70 oder 130kg** (je nach Konfiguration)

Möglichkeit einer klappbaren Rückenlehne : **ja**

Rückenlehnenhöhe : **250 bis 510 mm** (je nach Konfiguration)

Vorderradgrößen : **3", 4", 5", 6"**

Hinterradgrößen : **18", 20", 22", 24", 26"**

Radsturz : **0° bis 6°** (direkt am Stuhl verstellbar)

Verfügbare Polster : **Nylon, Wabe, Luftstrom**

Abmessungen in mm, Gewicht in kg. Messtoleranz: 15 mm, 1,5 kg, 1,5 °

NOTITZEN

VERMEIREN

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Str. 4
4061 Pasching

Tel.: +43(0)7229 64900

Fax: +43(0)7229 64900-90

@ : info@vermeiren.at

www.vermeiren.at

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Fachhandler in Ihrer Nähe.

Alle Rechte, auch an der Übersetzung, vorbehalten. • Kein Teil der Gebrauchsanweisung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Ausgabe März 2020.

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Für die neueste Version siehe: www.vermeiren.at

TriGO^o